





ITS GUN S

Kit C nula para Bi psia
Semi-Autom tica

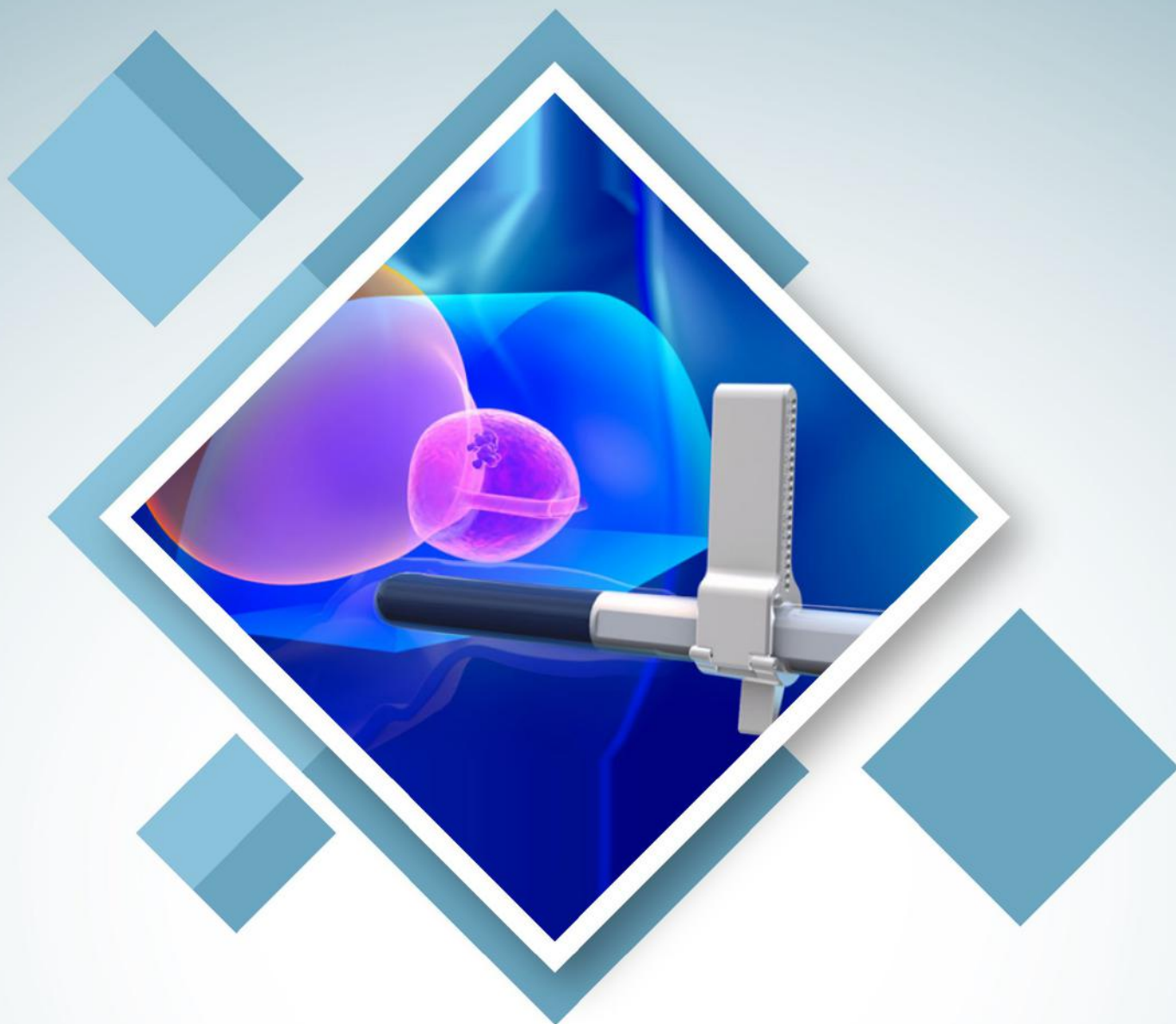

ITS GUN S

Kit Cândia para Biópsia
Semi-Automática

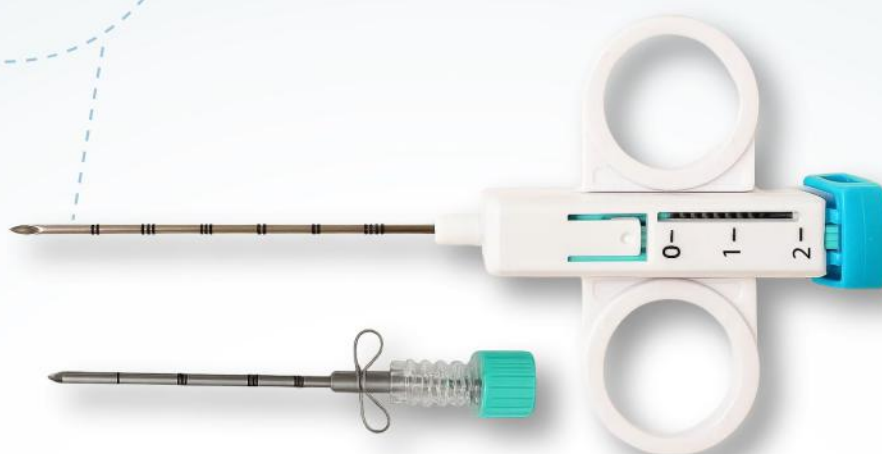

O Kit Cândia de biópsia semiautomática partes moles ITS GUN S, é destinada a **retirar material tecidual para análise em laboratório**.

As biópsias tem o objetivo de auxiliar o médico nos diagnósticos de patologias. Este dispositivo é indicado para biópsias de tecidos moles, glândulas e órgãos. Este dispositivo não está indicado para biópsia de tecido ósseo.

Utiliza uma agulha com introdutora coaxial, que será introduzida no tecido até o alvo para a biópsia.

O dispositivo semiautomático é introduzido na cândia que o guiará até o tecido alvo para coleta.

Uma vez no local da coleta, um mandril com ponta Franzen (gaveta) sairá de dentro do dispositivo e fará a coleta do material.

Ao disparar o mecanismo semiautomático da pistola, a gaveta com o material recém coletado retorna para dentro da cândia.

Ficando armazenado para posterior retirada e envio ao laboratório.



11 2988-7427

Av. Pres. Kennedy, 3500
Sala 301/303/316 - Sta. Paula
São Caetano do Sul - SP

Distribuidor Autorizado