




UROFLEX H

Catéter Uretral Duplo J Hidrofílico

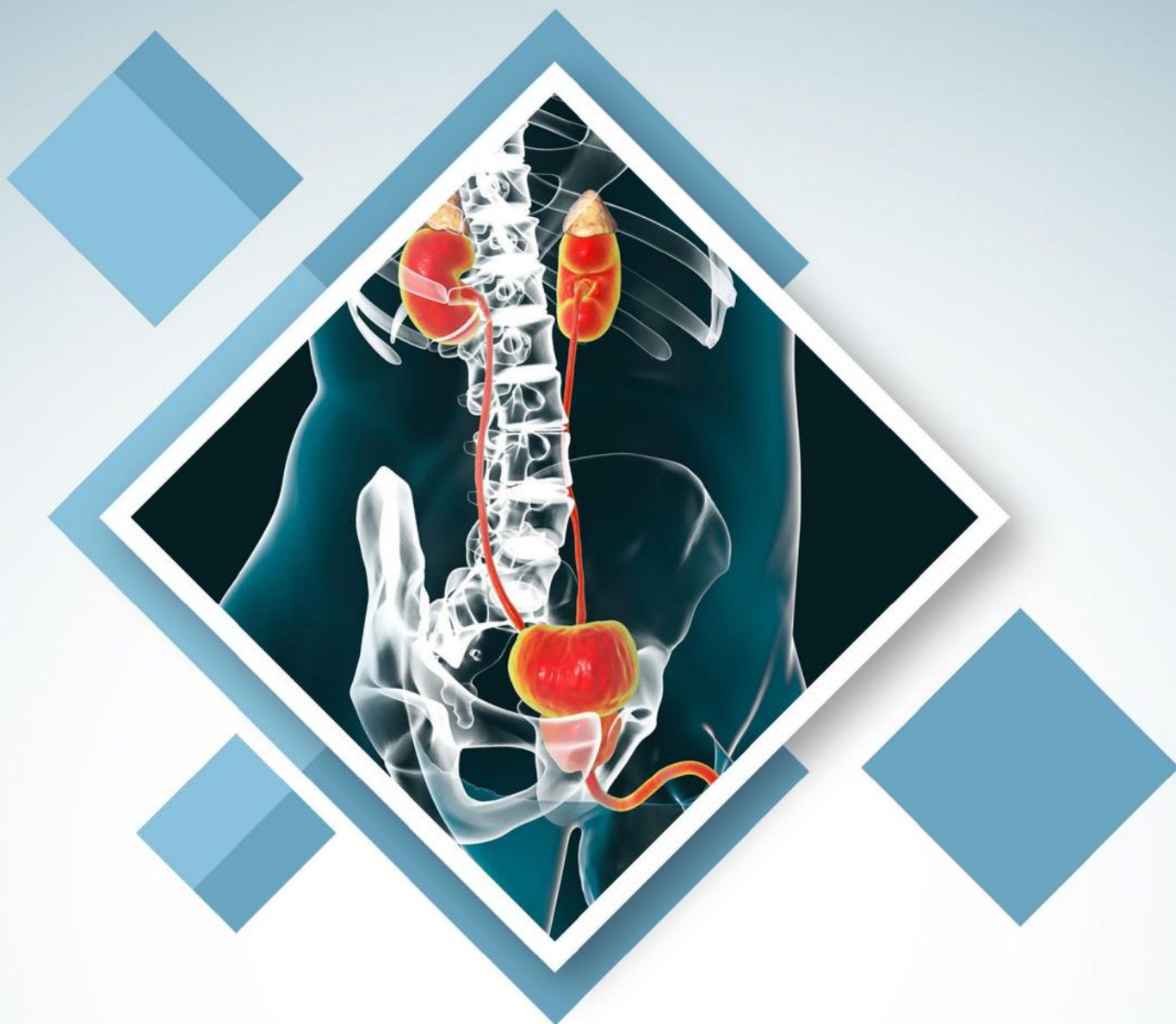


UROFLEX H

Catéter Uretral
Duplo J Hidrofílico

O kit catéter uretral duplo J UroFlex H, foi projetado para tratamento das obstruções uretrais, visando reestabelecer a drenagem de urina através do ureter. Ajuda no alívio da obstrução uretral em uma série de condições benignas, malignas e pós traumáticas. Sua colocação pode ser através de via endoscópica, percutânea ou via aberta.

ANVISA: 82130519030

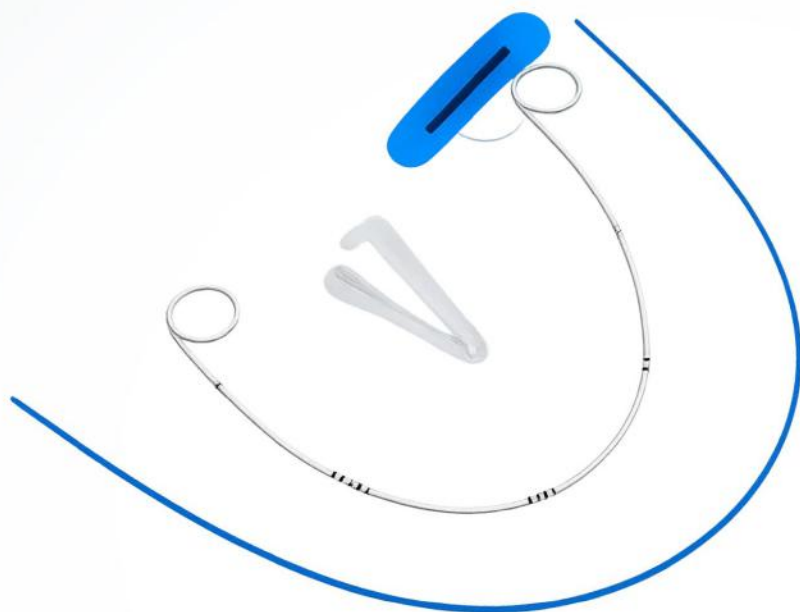

**KIT COM
COM FIO GUIA
HIDROFÍLICO**

A função do cateter duplo J é evitar obstruções do fluxo urinário que parte do rim para a bexiga, normalmente por estrangulamento ou obstrução do ureter. Uma das extremidades do dispositivo é implantada no sistema coletor de urina dos rins. A outra é posicionada em direção ao interior da bexiga, garantindo uma passagem para a urina. A angulação 360° em ambas as extremidades, impede que o catéter se desloque.

Disponível nas opções:

Poliuretano

Silicone

Disponível nas apresentações:

4FR

4,7FR

5FR

6FR

8FR

nos comprimentos de 12 a 30cm



11 2988-7427
11 91291-8889

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

itsdobrasil.com.br | contato@itsdobrasil.com.br | in | itsdobrasil | f | itsdobrasil

Distribuidor Autorizado