





ITS GUN A

Kit C nula de Bi psia de
Tecidos Moles Autom tica

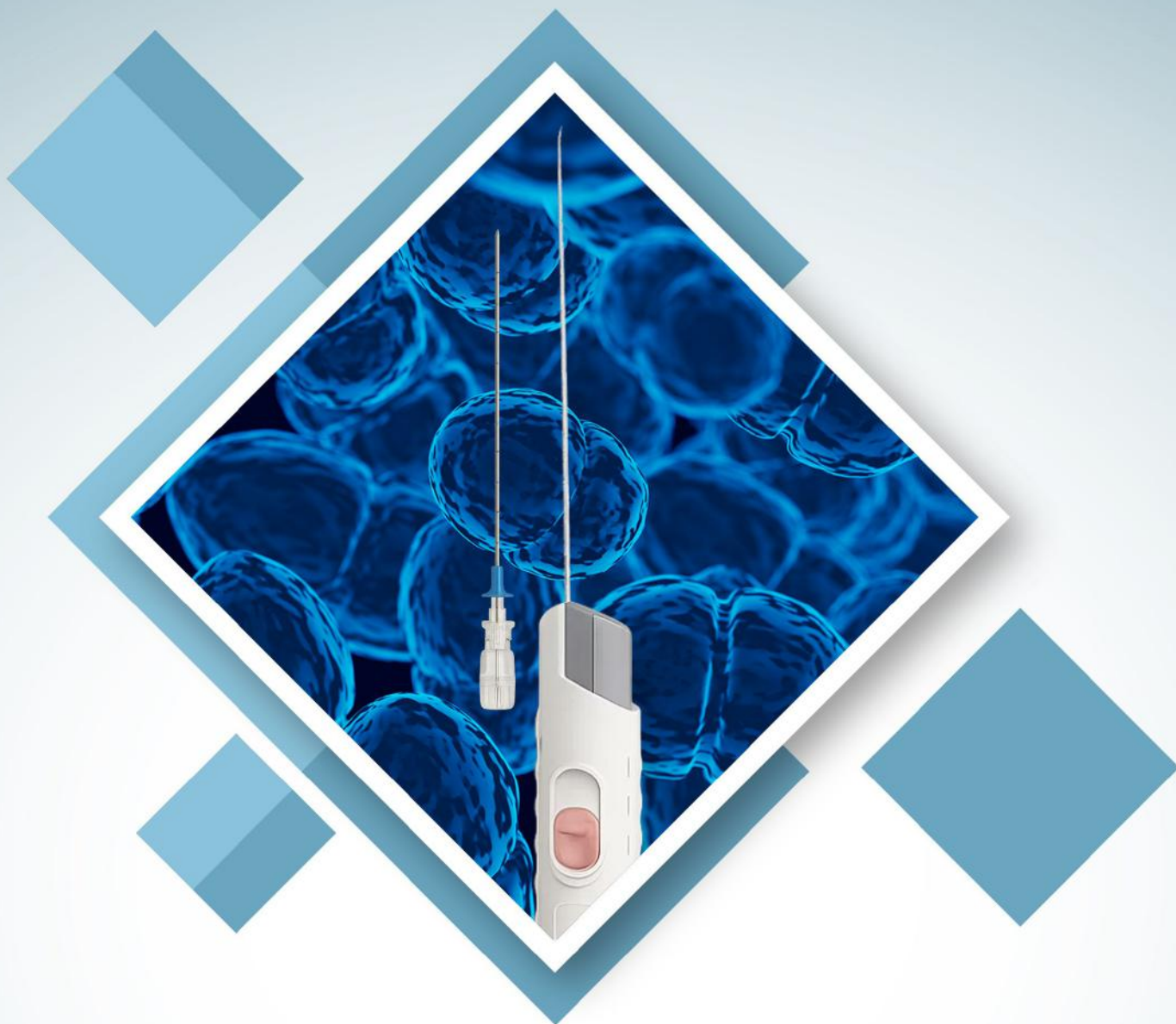

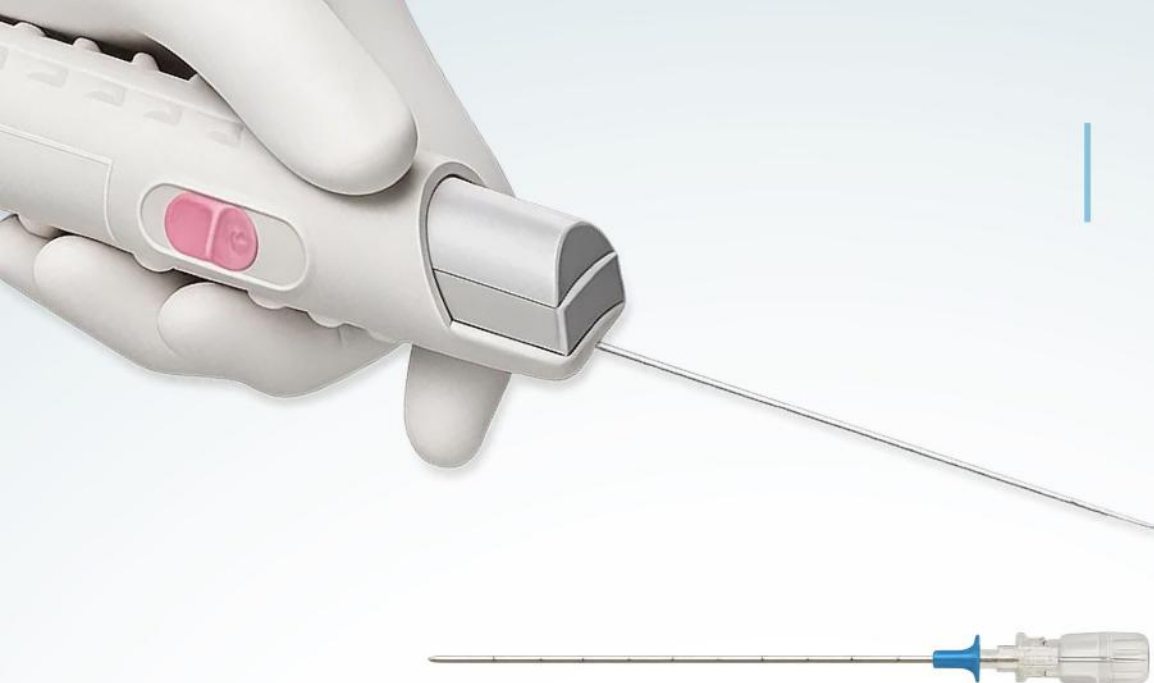

ITS GUN A

Kit Cânula de Biópsia de Tecidos Moles Automática

O Kit Cânula de Biópsia Automática Partes Moles ITS GUN A, **é destinada a retirar material tecidual para análise em laboratório.** As biópsias tem o objetivo de auxiliar o médico nos diagnósticos de patologias.

Este dispositivo é indicado para biópsias de tecidos moles, glândulas e órgãos. Este dispositivo não está indicado para biópsia de tecido ósseo.

Utiliza uma agulha com introdutora coaxial, que será introduzida no tecido até o alvo para a biópsia. O dispositivo automático é introduzido na cânula que o guiará até o tecido alvo para coleta. Uma vez no local da coleta, um mandril com ponta Franzeen (gaveta) sairá de dentro do dispositivo e fará a coleta do material. Ao disparar o mecanismo automático da pistola, a gaveta com o material recém coletado retorna para dentro da cânula e fica armazenado para posterior retirada e envio ao laboratório.

Disponível nas apresentações:

14GX100mm	14GX160mm	14GX200mm	14GX250mm
16GX100mm	16GX160mm	16GX200mm	16GX250mm
18GX100mm	18GX160mm	18GX200mm	18GX250mm



11 2988-7427
11 91291-8889

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

itsdobrasil.com.br | contato@itsdobrasil.com.br | in | itsdobrasil | @ | itsdobrasil

Distribuidor Autorizado