




ITS BONE MARROW

Kit Cânula de Biópsia Intraóssea



ITS BONE MARROW

Kit Cânula de Biópsia Intraóssea

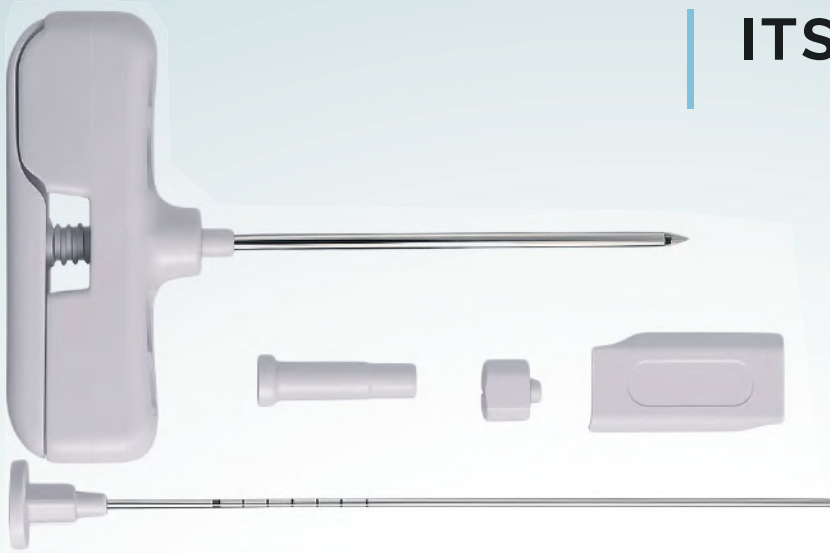

É destinada a retirar material tecidual para análise em laboratório. As biópsias tem o objetivo de auxiliar o médico nos diagnósticos de patologias.

Este dispositivo é indicado para **biópsias de tecidos ósseos, medula óssea, auxiliando o médico no diagnóstico e tratamento de transplante de medula.**

Utiliza uma cânula com empunhadura e mandril, que será introduzida no interior do osso chato produtor de medula óssea.

No interior do osso, o mandril será retirado e uma porção de sangue rico em medula óssea será aspirado através de uma seringa.

Caso desejado, o sistema coletor de tecido ósseo pode ser inserido na cânula e através de movimentos circulares, a coleta de tecido será finalizada.

Sistema de
TRAVAMENTO
DO MANDRIL

KIT
contém
coletor de
fragmentos
ósseos

Referências	Modelos
ITBM-0810	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 08GX10cm
ITBM-0815	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 08GX15cm
ITBM-0910	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 09GX10cm
ITBM-0915	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 09GX15cm
ITBM-1110	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 11GX10cm
ITBM-1115	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 11GX15cm
ITBM-1310	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 13GX10cm
ITBM-1315	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 13GX15cm
ITBM-1410	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 14GX10cm
ITBM-1415	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 14GX15cm
ITBM-0810SC	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 08GX10cm com Sistema Coletor Ósseo
ITBM-0815SC	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 08GX15cm com Sistema Coletor Ósseo
ITBM-0910SC	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 09GX10cm com Sistema Coletor Ósseo
ITBM-0915SC	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 09GX15cm com Sistema Coletor Ósseo
ITBM-1110SC	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 11GX10cm com Sistema Coletor Ósseo
ITBM-1115SC	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 11GX15cm com Sistema Coletor Ósseo
ITBM-1310SC	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 13GX10cm com Sistema Coletor Ósseo
ITBM-1315SC	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 13GX15cm com Sistema Coletor Ósseo
ITBM-1410SC	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 14GX10cm com Sistema Coletor Ósseo
ITBM-1415SC	Kit Cânula de Biópsia Intraóssea ITS Bone Marrow 14GX15cm com Sistema Coletor Ósseo

Distribuidor Autorizado



11 2988-7427
11 91291-8889

Av. Pres. Kennedy, 3500 - Sala 301/303/312/313/316 - Sta. Paula - São Caetano do Sul - SP

itsdobrasil.com.br | contato@itsdobrasil.com.br | in | itsdobrasil | f | itsdobrasil